



Syogra PRZENOŚNE
instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

SYOGRA™



Łóżko masujące JMM-003 przenośne

Instrukcja obsługi




Drodzy Klienci

dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi, gdyż zawiera informacje zapewniające bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu.

Spis treści:

Zawartość przesyłki
Wskazania i przeciwwskazania
Ważne wskazówki bezpieczeństwa
Związek między kręgosłupem a organami
Opis panelu sterowniczego
Programy masażu
Podłączenie
Serwis
Warunki gwarancji
Specyfikacja produktu

KOMPLET POWINIEN ZAWIERAĆ 1 PACZKĘ , A W NIEJ :

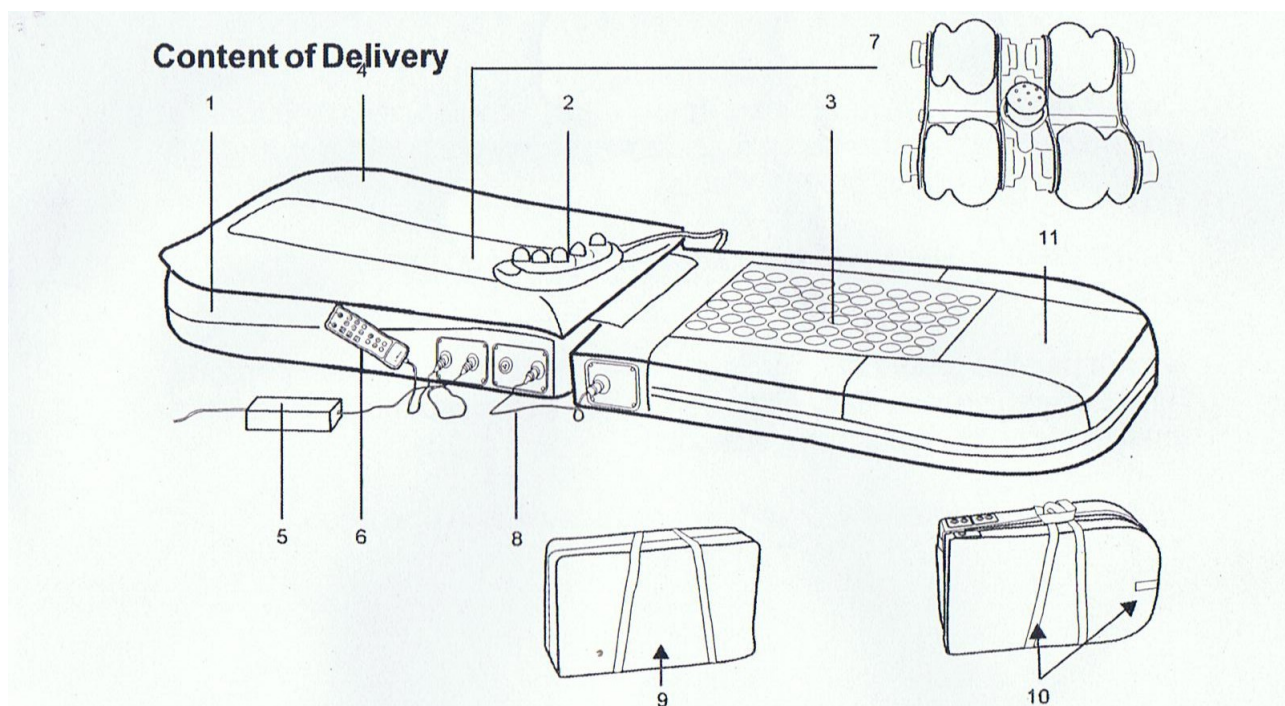

- 1) Mata pleców
- 2) Projektor nefrytowy 6 kulowy
- 3) Mata nóg wraz z wbudowaną matą grzewczą
- 4) Dodatkowa tapicerka zabezpieczająca
- 5) Zasilacz (DC 36V)
- 6) Pilot sterujący
- 7) 4 rolki nefrytowe w części pleców
- 8) Kabel łączący obie maty łóżka
- 9) Torba transportowa

- 10) Pasy transportowe
- 11) Pojemnik na kable oraz pilota znajdujący się w macie nóg po jej rozpięciu

Wskazania do masażu:

1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

- w zaburzeniach odżywczych skóry
- w odmrożeniach
- przy celulicie
- przy nadwadze
- w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
- w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
- przy dołach po insulinowych

2.Narząd ruchu:

- w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniem w łóżku)
- przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
- w stanach pourazowych mięśni
- w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
- rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
- relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
- przy korekcji wady postawy
- Szpotawość i koślawość kolan
- deformacje kręgosłupa
- przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
- dysplazja stawu biodrowego
- stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
- zmiany narządu ruchu z przeciążenia
- choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
- wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
- choroby reumatyczne
- aby zapobiec odleżynom
- masaż kondycyjny
- nerwice

3.Układ krążenia:

- stany obniżonego ciśnienia
- choroby obwodowych naczyń krwionośnych
- niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żyłnej i chłonki (w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
- stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
- choroba Raynauda

4. W chorobach układu nerwowego:

- przewlekłe zapalenie nerwów
- zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
- stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
- choroby mózgu i opon mózgowych




Przeciwwskazania do masażu:

Jeśli posiadają Państwo jakikolwiek z niżej wymienionych stanów/chorób, proszę skonsultować się z lekarzem rodzinnym przed użytkowaniem łóżka masującego:

- ostre infekcje
- artretyzm
- problemy sercowe
- złośliwe guzy
- wysokie stany gorączkowe
- ciąża
- osteoporoza
- wewnątrz kręgowo problemy dyskowe
- sztuczne organy/stawy, lub implanty
- niedawne operacje

Osoby ważące więcej niż 130 kg nie powinny używać tego produktu.

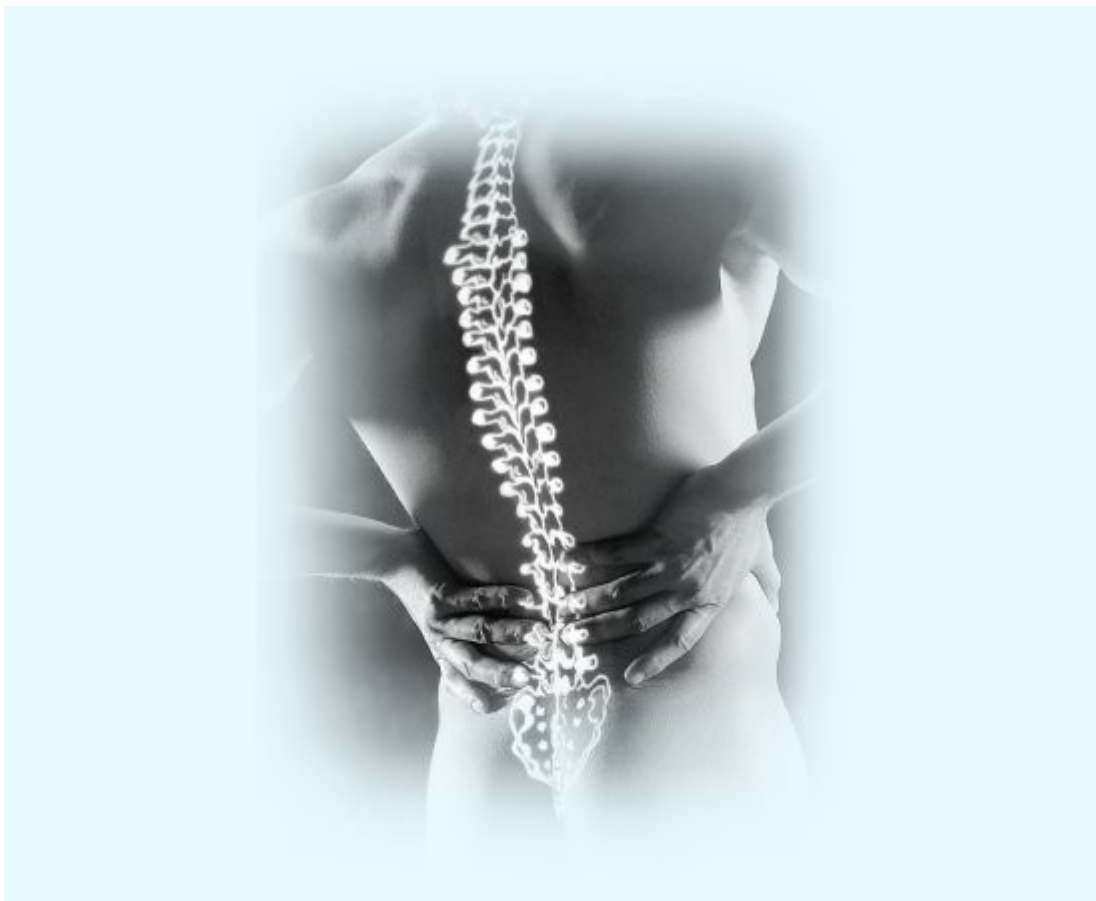

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, zanim skorzystają Państwo z naszego produktu, dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Należy zawsze odłączyć urządzenie od prądu po użytkowaniu!

Proszę ostrożnie złożyć produkt.

Jeśli rolki masujące, lub przewód elektryczny zostaną uszkodzone, w trakcie pracy łóżka, należy natychmiast wyłączyć łóżko i skontaktować się z najbliższym dystrybutorem. Użytkowanie uszkodzonego łóżka może spowodować dalsze szkody urządzenia, porażenie prądem i zranienia ciała.

Należy nie rozkładać łóżka, naprawiać lub zmieniać jego konstrukcji i mechanizmów, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń, porażenia prądem i spowodować utratę gwarancji.

Należy ustawić łóżko w miejscach suchych. Nie należy korzystać z łóżka gdy jest zamoczone.


Nie należy użytkować produktu od razu po rozpakowaniu i złożeniu. Proszę poczekać, aż łóżko zaadaptuje się do temperatury pomieszczenia, w którym się znajduje.

Proszę trzymać dzieci z daleka od urządzenia, gdy jest w trakcie pracy.




Związek między kręgosłupem a organami

Badania naukowe dowodzą, że każdy organ jest połączony z kręgosłupem za pomocą nerwów. W ten sposób można stosować zabiegi na kręgosłup, takie jak chiropraktyka czy termoterapia, gdy wystąpią zaburzenia pracy organów. Tabela poniżej ilustruje związki organów między każdym odcinkiem kręgosłupa.

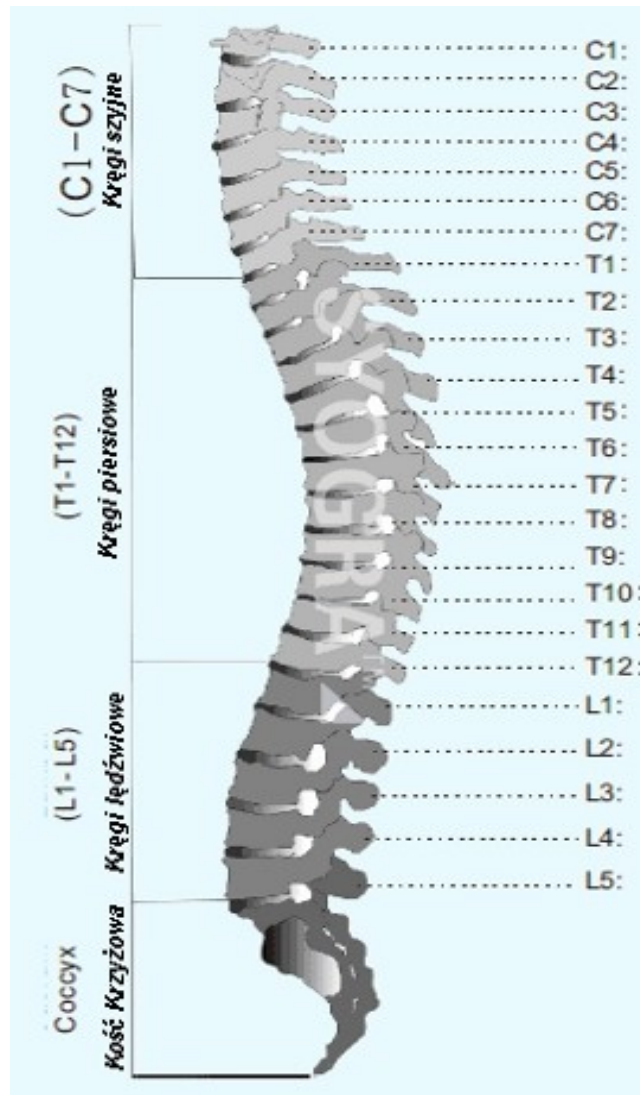

Segmenty	Zakres oddziaływania	Przykładowe objawy chorobowe
C1-C2	Dopływ krwi do głowy, przysadka mózgowa, skóra głowy, kości części twarzowej, mózg, ucho wewnętrzne i środkowe, współczulny układ nerwowy	Bóle głowy, nadpobudliwość, nerwica, migrena, bezsenność, nadciśnienie tętnicze, zanik pamięci, zmęczenie, zawroty głowy, depresja, wyczerpanie, osłabienie organizmu
C2-C3	Oczy, nerwy wzrokowe, słuchowe, zatoki, wyrostek sutkowy, język, czoło	Zatoki, alergie, zez, głuchota, dolegliwości oczu, bóle uszu, omdlenia, niektóre rodzaje ślepoty
C3-C4	Policzki, małżowiny uszne, kości części twarzowej, zęby, nerw twarzowy	Nerwobóle, zapalenie nerwu, trądzik, wągry, egzema
C4-C5	Nos, wargi, usta, trąbka Eustachiusza	Katar sienny, upośledzenie słuchu
C5-C6	Struny głosowe, gardło, krtani	Zapalenie krtani, chrypka, ból gardła, angina itp.
C6-C7	Mięśnie karku, barki, migdałki	Sztynność karku, bóle ramion, zapalenie migdałków, krztusiec
C7-Th1	Tarczycza, kaletka maziowa stawu barkowego, łokieć	Zapalenie torebki stawowej, przeziębienia, choroby tarczycy
Th1-Th2	Przedramiona, nadgarstki, dłonie, palce, przelyk, tchawica	Bóle przedramion i dłoni, astma, kaszel, trudności w oddychaniu
Th2-Th3	Serce-zastawki, osierdzie, naczynia wieńcowe	Zaburzenia czynności serca, niektóre dolegliwości piersi
Th3-Th4	Płuca, oskrzela, opłucna, klatka piersiowa, piersi	Zapalenie oskrzeli, zapalenie opłucnej, zapalenie płuc, grypa
Th4-Th5	Pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe	Dolegliwości pęcherzyka żółciowego, żółtaczka, półpasiec
Th5-Th6	Wątroba, splot słoneczny, krew	Dolegliwości wątroby, gorączka, niskie ciśnienie krwi, anemia, zaburzenia układu krążenia
Th6-Th7	Żołądek	Dolegliwości żołądka, zaburzenia trawienia, zgaga
Th7-Th8	Trzustka, dwunastnica	Wrzody, nieżyt żołądka, osłabienie systemu odpornościowego
Th8-Th9	Śledziona	Wrzody, nieżyt żołądka, osłabienie systemu odpornościowego
Th9-Th10	Nadnercza	Alergie, pokrzywka
Th10-Th11	Nerki	Dolegliwości nerek, zwapnienie tętnic, chroniczne zmęczenie, zapalenie miedniczek nerkowych
Th11-Th12	Nerki, moczowody	Schorzenia skórne jak trądzik, wągry, egzema lub czyraki
Th12-L1	Jelito grube, pachwiny	Zaparcie, zapalenie jelita grubego, biegunka, rozwolnienie, niektóre rodzaje przepukliny
L1-L2	Wyrostek robaczkowy, brzuch, uda	Skurcze, kłopoty z oddychaniem, nadkwasota, żylaki
L2-L3	Narządy płciowe, macica, pęcherz, kolano	Dolegliwości pęcherza moczowego, miesiączkowania - np. bolesne lub nieregularne miesiączki, poronienia, moczenie nocne, impotencja, dolegliwości klimakterium, dolegliwości kolan
L3-L4	Prostata, mięśnie dolnej części pleców, ischias	Ischias, postrzał, trudne, bolesne oddawanie moczu, bóle pleców
L4-L5	Stawy skokowe, stopy, podudzie	Złe ukrwienie podudzi, spuchnięte kostki, słabe stawy skokowe, podbicie, zimne stopy, słabe nogi, kurcze łydek
L5-S1	Pęcherz moczowy, odbył, narządy płciowe	Zaburzenia erekcji, zaburzenia wydzielania, częstomocz, 'brak czucia' w narządach płciowych

Opis pilota sterującego

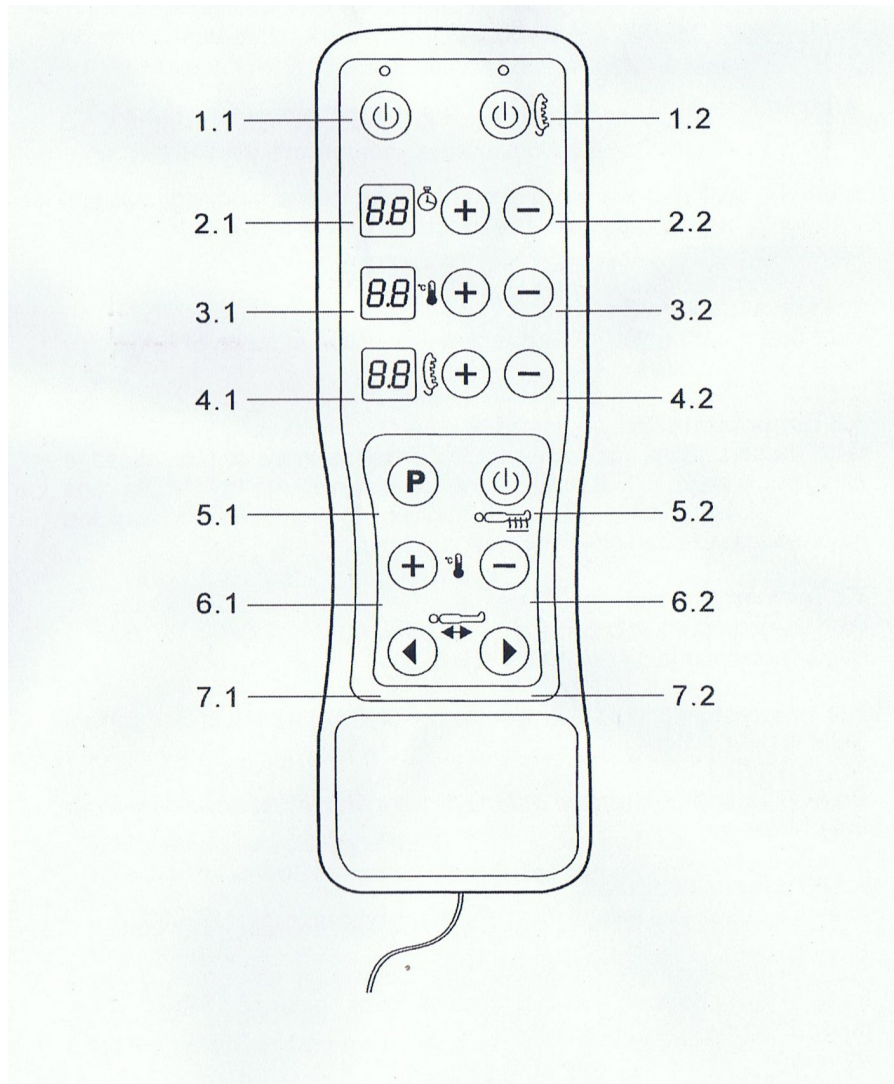

1.1 Załączenie pracy łóżka

1.2 Załączenie projektora 6 kulowego

2.1 Wyświetlacz czasu masażu

2.2 Regulacja czasu masażu w krokach co 5 minut. Masaż może trwać od 5 do 95 minut.

3.1 Wyświetlacz temperatury dla rolek nefrytowych w łóżku

3.2 Regulacja temperatury rolek nefrytowych:

L1 – temperatura około 40 'C
L2 – temperatura około 50 'C
L3 – temperatura około 60 'C
L4 – temperatura około 70 'C

4.1 Wyświetlacz temperatury projektora 6 kulowego
4.2 Regulacja temperatury projektora nefrytowego:

L1 – temperatura około 40 'C
L2 – temperatura około 50 'C
L3 – temperatura około 60 'C
L4 – temperatura około 70 'C


5.1 Programy automatyczne

Programy automatyczne to programy P0,P1,P2 działające w następujący sposób:


Wykresy działania programów odczytuje się w następujący sposób:

Każda linia pionowa oznacza ruch projektora nefrytowego wzdłuż kręgosłupa począwszy od części szyjnej do części lędźwiowej, a następnie powrót do części szyjnej. Krótkie fragmenty liniowe oznaczają pracę projektora na poszczególnych częściach kręgosłupa. Linie przerywane oznaczają zatrzymanie się projektora w celu punktowego nagrzewania (masaż moksy lub zabieg ignipunktury) na poszczególnych odcinkach kręgosłupa. Każdy przedstawiony na wykresach cykl będzie powtarzany w zależności od ustawionego czasu trwania masażu.

PROGRAM „P0”

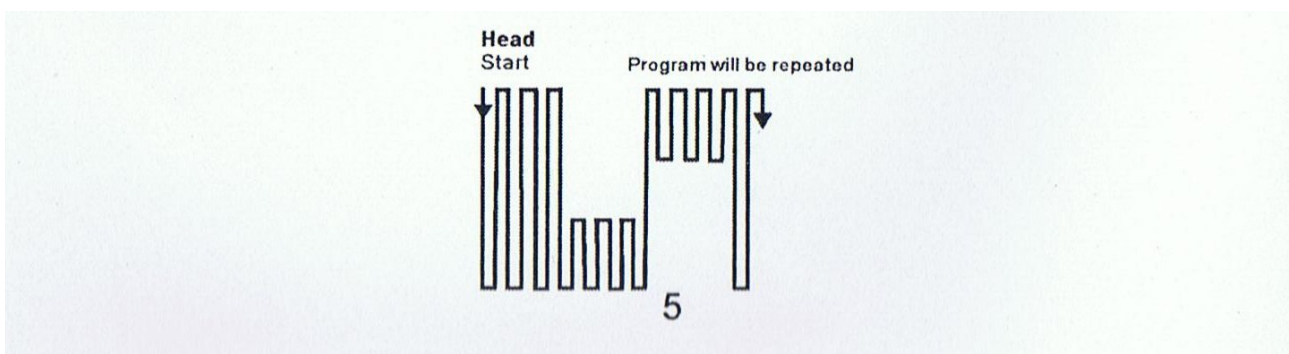


PROGRAM „P1”

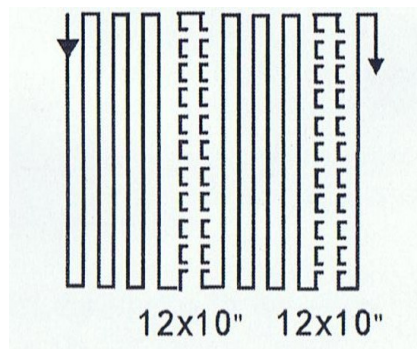

ZATRZYMANIE ROLEK NEFRYTOWYCH W 12 PUNKTACH
NA CZAS 10 SEKUND

PROGRAM „P2”

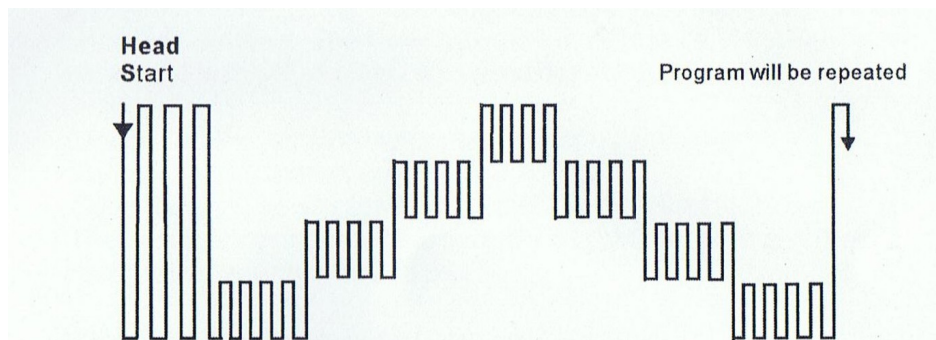

5.2 Załączenie nefrytowej maty grzewczej wbudowanej w części nóg
6.1 Regulacja temperatury nefrytowej maty grzewczej w części nóg w górę
6.2 Regulacja temperatury nefrytowej maty grzewczej w dół
Temperatura ustawiana jest według następujących poziomów:

- L1 – temperatura około 40 'C
- L2 – temperatura około 50 'C
- L3 – temperatura około 60 'C
- L4 – temperatura około 70 'C

W momencie ustawiania temperatury nefrytowej maty grzewczej w części nóg, regulowana temperatura ustawi się na wyświetlaczu 3.1 gdzie ustawia się temperaturę dla głowicy masującej w części pleców po czym po 3 sekundach zniknie i wyświetlana będzie wyłącznie temperatura dla części pleców.

7.1/7.2 Ręczne sterowanie głowicą masującą w części pleców. Po naciśnięciu strzałki skierowanej w prawą stronę, głowica masująca będzie przesuwana się w stronę części lędźwiowej kręgosłupa, po naciśnięciu strzałki w prawo głowica masująca przesunie się w stronę części szyjnej kręgosłupa. Po naciśnięciu strzałki jeszcze raz podczas masażu, głowica masująca zatrzyma się w odpowiednim punkcie w celu nagrzewania punktowego wybranej części kręgosłupa.

W momencie zakończenia masażu na łóżku masującym należy przyciskiem 1.1 zakończyć pracę łóżka i poczekać aż głowica masująca wróci do pozycji początkowej. Charakterystyczny sygnał dźwiękowy zakończy pracę łóżka po czym można powoli schodzić z mat masujących.

Serwis (tylko przez wykwalifikowanych techników)

Należy zawsze odłączyć produkt od prądu, przed otwarciem powłoki.

1) Czyszczenie wewnętrzne

Należy regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z wnętrza łóżka. Należy w tym celu usunąć powłokę ze skóry poliuretanowej.

Następnie oczyścić suchą szmatką.

Należy także oczyścić aluminiowe szyny, po których poruszają się kółka wałków masujących.

2) Wymiana grzewczych żarówek helowych


Należy regularnie sprawdzać czy wszystkie żarówki wałków masujących działają poprawnie.

Niektóre z nich są połączone zbiorczo, gdy jedna z żarówek jest uszkodzona, wtedy cała seria będzie źle działała. By wymienić żarówkę, należy:

- odłączyć transformator od zewnętrznego zasilacza.
- usunąć powłokę poliuretanową
- lekko odkręcić dwie śruby, które przytrzymują oprawkę żarówki
- następnie można wyjąć oprawkę żarówki, przez wykręcenie śrub
- na koniec wyjąć żarówkę z oprawki i wymienić na nową

Uwaga! Żarówki mogą być bardzo gorące! Należy odstawić żarówki by ostygły, szczególnie jeśli produkt był wcześniej używany.

- włożyć żarówkę w oprawkę i umieścić oprawkę w miejscu wymiany
- przykręcić obie śruby

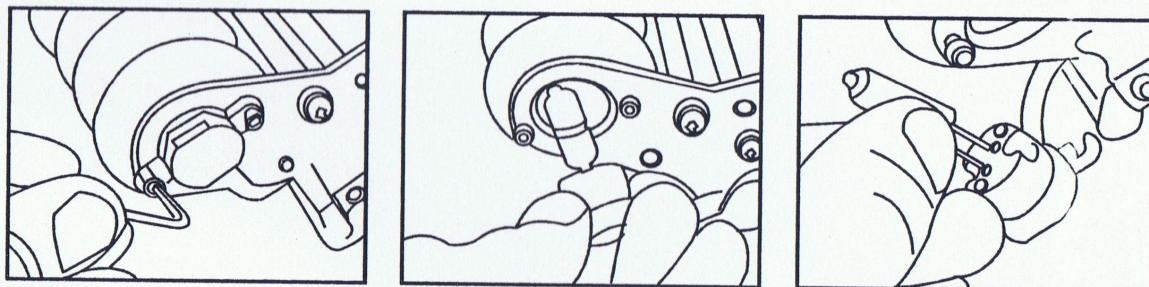

PRZECIWSKAZANIA DO MASAŻU :

- zbyt wysoka temperatura ciała, powyżej 38
 - krwotoki
 - żylaki z zmianami skórnymi
 - choroby krwi
 - cięża patologiczna
 - nowotwory
 - tętniaki
- obszerne zmiany dermatologiczne, ropienie, owrzodzenie
- choroby wrzodowe z krwawieniem
- kamica wątrobowa i nerkowa

WŁAŚCIWOŚCI NEFRYTU I PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO



Nefryt to kamień półszlachetny znany jako naturalne źródło promieni podczerwonych przenikających do 6 cm w głąb ciała. Masaż rollkami z nefrytu powoduje regenerację organizmu i uruchomienie w nim naturalnych mechanizmów obronnych. Uwalniając swą moc nefryt przenika głęboko w skórę, uwalnia dobroczynne pierwiastki, wspomagają odporność organizmu, poprawiają wydolność krążeniową. Nazwa kamienia pochodzi od gr. Nephros- Nerka. Od wieków wiadomo, iż kamień ten odznacza się szczególnymi właściwościami leczniczymi wspomagającymi leczenie chorób związanych z nerkami. Inaczej często nazywany kamieniem nerkowym. Nefryt uwalnia promieniowanie podczerwone. Promieniowanie podczerwone stanowi 40 % promieniowania słonecznego i umożliwia każdemu organizmowi na Ziemi prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie. Współczesny rozwój technologii umożliwia nam wykorzystanie innych niż Słońce źródeł promieniowania podczerwonego. Każdy z nas odczuwa zimą brak promieni słonecznych, a "Nefrytowe Łóżko" rekompensuje nam ten brak.

Promieniowanie podczerwone uwalniane z kamieni nefrytowych ma wpływ na:

- poprawę przemiany materii,
 - polepszenie krążenia,
- zmniejszenie napięcia mięśni,
 - uśmierzenie bólu,
- przyspieszenie procesów gojenia się,
 - zmniejszenie zakwasów,
- wspomaganie usuwania toksyn z organizmu poprzez pocenie się.
 - choroby uszu, nosa, gardła i wielu innych schorzeń

WSKAZANIA DO MASAŻU :

1.W chorobach skóry masaż zaleca się:

- w zaburzeniach odżywczych skóry
 - w odmrożeniach
 - przy celulicie
 - przy nadwadze
- w chorobach naczyń krwionośnych i limfatycznych
- w celu rozmiękczenia blizn pooperacyjnych i zrostów powstałych po infekcjach domięśniowych
 - przy dołach po insulinowych

2.Narząd ruchu:

- w celu zapobieganiu i leczenia zaników mięśniowych (często spowodowanych długotrwałym przebywaniem w łóżku)
- przy występowaniu zaników mięśniowych pochodzenia neurogennego
 - w stanach pourazowych mięśni
 - w problemach z odpowiednim napięciem mięśniowym
 - rehabilitacja po złamaniach, unieruchomieniu
- relaksacja mięśni, przykurcze w okresie wzmożonego stresu, wysiłku
 - przy korekcji wady postawy
 - Szpotawość i koślawość kolan
 - deformacje kręgosłupa
- przeciwbólowo przy bólach kręgosłupa, pleców, organów, nerwobóle, migreny
 - dysplazja stawu biodrowego
- stany pourazowe stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia itp.
 - zmiany narządu ruchu z przeciążenia
- choroby kości i stawów, przebiegające z przykurczami stawowymi
 - wady wrodzone i nabyte narządu ruchu
 - choroby reumatyczne
 - aby zapobiec odleżynom
 - masaż kondycyjny
 - nerwice

3.Układ krążenia:

- stany obniżonego ciśnienia
- choroby obwodowych naczyń krwionośnych
- niewydolność krążenia, celem ułatwienia odpływu krwi żyłnej i chłonki (w kończynach dolnych ten odpływ jest dużo trudniejszy)
- stany po przebytych zapaleniach żył kończyn dolnych
 - choroba Raynauda

4. W chorobach układu nerwowego:

- przewlekłe zapalenie nerwów
- zespół wypadnięcia krążka międzykręgowego
- stany po urazach ośrodkowego układu nerwowego
 - choroby mózgu i opon mózgowych

PODCZAS RÓŻNORODNYCH ZABIEGÓW ŁÓŻKO MASUJĄCE WYKORZYSTUJE NASTĘPUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI :

MASAŻ

Jest jedną z najstarszych metod leczniczych. Jest to zespół zabiegów manualnych, które oddziałują na tkanki i narządy naszego ciała. Masaż wpływa na zmniejszenie napięcia nerwowego, co pozwala uwolnić się od bólu mięśni, stawów i głowy. Rozluźnia i relaksuje, poprawia ukrwienie i przepływ limfy. Działa na układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowy, stawy i skórę.

CHIROPRAKTYKA

Metoda leczenia opracowana przez Daniela Palmera (1845-1913) w USA. Jest to naukowo opracowana metoda nastawiania kręgów, działa na układ kostny oraz stawy, jest najstarszą, najskuteczniejszą metodą leczenia schorzeń w układzie kostno-mięśniowym oraz chorób ogólnoustrojowych.

AKUPRESURA

Jest naturalną metodą leczenia polegającą na masowaniu i uciskaniu poszczególnych punktów energetycznych znajdujących się na meridianach. Zadaniem akupresury jest stymulacja systemu energetycznego organizmu, pobudzenie przepływu krwi, usunięcie tzw. blokady energetycznej. Jest skuteczna w leczeniu: alergii, migreny wszelkiego rodzaju bólów, infekcji, stanów zapalnych i nerwic.

TERMOPUNKTURA (moksa)

Jest to rodzaj akupunktury termicznej. Jest to działanie ciepłem na wybrane punkty organizmu. Zabiegi moksy zaleca się przy biegunkach, bólach żołądka, w gościec stawowym, bezsenności. Poprawia krążenie, uśmierza ból, znosi uczucie chłodu, zwiększa siły obronne organizmu. Ma szczególnie korzystny wpływ w leczeniu chorób skóry, egzemy, łuszczycy i bielactwa.

PROMIENIOWANIE PODCZERWONE

Jest wytwarzane naturalnie przez kamienie nefrytowe, ma korzystny wpływ na organizm człowieka i dlatego jest stosowane w medycynie do zabiegów terapeutycznych



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42